



## Rapid Response

### Xylazine Test Strip Kit (Liquid / Powder)

REF XYL-18S2-5K

Product Insert

#### WARNING: THIS TEST DOES NOT EVALUATE DRUG SAFETY OR PURITY

A rapid visual immunoassay for the detection of Xylazine in suspicious substances from surfaces and liquids from suspicious receptacles.

For forensic and IVD use.

### Intended Use

The Rapid Response™ Xylazine Test Strip Kit (Liquid / Powder) is a rapid visual immunoassay for the qualitative, presumptive detection of drugs in suspicious substances from solids, liquids and surfaces. By using this test strip, you can determine if your sample contains Xylazine. The detection limit of this test is 1000 ng/mL.

| Parameter      | Calibrator | Cut-off(ng/mL) |
|----------------|------------|----------------|
| XYL (Xylazine) | Xylazine   | 1,000          |

### Materials

#### Materials provided

- Test strips with microscopes
- Buffer Tubes
- Tube Stand
- Swabs
- Product insert
- Result interpretation card

#### Materials required but not provided

- Timer

### Precautions

- The test device is NOT intended to determine the purity, composition, or if the substance being examined is safe to use.
- A positive or negative test result is NOT an indication that the substance being examined is safe to use. Many factors come into play when examining the samples, including but not limited to mixture of multiple substances, solubility, and pH of the sample.
- BTNX Inc. does not encourage the use, supply, or production of illegal drugs or controlled substances in any way. The device is intended for harm reduction purposes. Follow the advice of your local harm reduction or public health agency.
- There are no direct therapeutic or diagnostic claims being made for this product. These tests are not involved in diagnosing, treating, mitigating, or preventing a disease, disorder or symptom in human beings, nor do they restore, modify or correct a body structure, function of the human body.
- The Rapid Response™ Xylazine Test Strip Kit only gives an indication and should be used solely as a presumptive guide to work in conjunction with further analysis such as Gas Chromatography- Mass Spectrometry or High Performance Liquid Chromatography (HPLC). For complete analysis, we recommend all samples should be sent to a professionally certified laboratory.
- Do not use after expiration date indicated on the package. Do not use the test if its foil pouch is damaged. Do not reuse tests.
- This kit contains products of animal origin. Certified knowledge of the

origin and/or sanitary state of the animals does not totally guarantee the absence of transmissible pathogenic agents. It is therefore recommended that these products be treated as potentially infectious, and handled by observing the usual safety precautions (do not ingest or inhale).


- Read the entire procedure carefully prior to performing any tests.
- Do not eat, drink or smoke in the area where the samples and kits are handled. It is recommended to wear protective clothing such as disposable gloves and eye protection when handling harmful substances.
- Humidity and temperature can adversely affect results.
- The used testing materials should be discarded in accordance with local, state and/or federal regulations.
- The Rapid Response™ Xylazine Test Strip Kit has been tested for extreme shipping conditions, and its performance has not been impacted. The test can be stored between 36-86°F (2-30°C).

### Test Procedure

Bring tests, samples, buffer and/or controls to room temperature 59-86°F (15-30°C) before use.



- Prepare the desired number of buffer tubes by placing them in the tube stand.
- Remove the buffer tube seal.
- Remove the swab from its packaging.
- Collect the Sample
  - For Liquid Samples:** Dip the swab into the liquid sample if necessary rotate and swipe the sample to absorb as much liquid as possible
  - For Solid Samples:** Dip the swab into the buffer tube for 3 seconds to moisten the swab. Wipe the tip of the swab in the substance several times. The more times the swab is wiped into the substance, the more of the drug can be absorbed.
  - For Powder Samples:** Using the microscop, collect one scoop of drug (5-10mg).

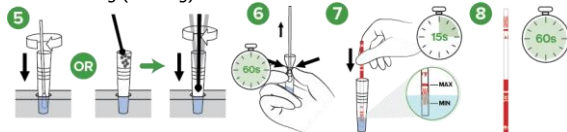

- Insert the swab or the microscop into the buffer tube, stir gently for 1 to 2 minutes and remove.
- When using the swab, squeeze the sides of the tube to remove as much liquid from the swab tip as possible.
- Remove the test strip from its sealed pouch and use it as soon as possible. Hold the strip by the end, where the product name (XYL) is printed. Do not touch the strip membrane (the white section of the strip). Holding the strip vertically, dip the test strip in the liquid for at least 10-15 seconds. Immerse the strip where the wavy lines are, but not above the solid (maximum) line on the test strip.
- Remove the strip from the sample and place it on a non-absorbent flat surface. Start the timer and wait for the colored band(s) to appear.
- A negative result can be interpreted as soon as both the test (T) and control (C) lines appear. A positive result can be interpreted once the control line has appeared and the background has cleared to white, typically by 60 seconds. Do not read results after 10 minutes.

### Results Interpretation

#### Positive - Xylazine Detected

Only one colored band appears in the control region (C). No apparent colored band appears in the test region (T).




#### Negative – Xylazine Could Not be Detected

Two colored bands appear on the membrane. One band appears in the control region (C) and another band appears in the test region (T).



#### Invalid

Control band fails to appear. Results from any test which has not produced a control band at the specified read time must be discarded. Please review the procedure and repeat with a new test. If the problem persists, discontinue using the kit immediately and contact your local distributor.

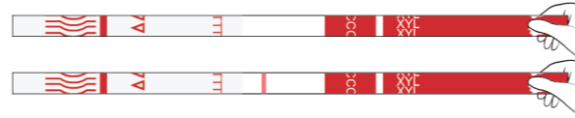

#### NOTE:

- The intensity of color in the test region (T) may vary depending on the concentration of analytes present in the sample. Therefore, any shade of color in the test region should be considered negative. Note that this is a qualitative test only and cannot determine the concentration of analytes in the sample.
- Insufficient sample volume, incorrect operating procedure or expired tests are the most likely reasons for control band failure.

### Quality Control

#### Internal Procedural Controls

Internal procedural controls are included in the test. A colored band appearing in the control region (C) is considered an internal positive procedural control, confirming sufficient sample volume and correct procedural technique.

### Limitations of the Test

- There is a possibility that technical or procedural errors as well as other substances and factors may interfere with the Rapid Response™ Xylazine Test Strip Kit (Liquid / Powder) and cause false results.
- A positive result indicates the presence of xylazine only and does not indicate quantity.
- A negative result does not at any time rule out the presence of xylazine, as they may be present below the minimum detection level of the test.
- The Rapid Response™ Xylazine Test Strip Kit (Liquid / Powder) test is for forensic and IVD use and should be only used for the qualitative detection of xylazine.
- This assay provides a preliminary analytical test result only. A more specific alternative chemical method must be used to obtain a confirmed analytical result. Gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) has been established as the preferred confirmatory method by the National Institute on Drug Abuse (NIDA). Clinical consideration and professional judgment should be applied to any test result, particularly when preliminary positive results are indicated.

- A negative result may not necessarily indicate drug-free sample. Negative results can be obtained when the drug is present but below the cut-off level of the test.
- This test may not distinguish between xylazine and other illicit substances.

### Performance Characteristics

#### A. Reproducibility

The reproducibility of the Rapid Response™ Xylazine Test Strip Kit (Liquid / Powder) was verified by blind tests performed at four different locations. Samples with xylazine concentrations at 50% of the cut-off were all determined to be negative, while samples with xylazine concentrations at 200% of the cut-off were all determined to be positive.

#### B. Precision

Test precision was determined by blind tests with control solutions. Controls with xylazine concentrations at 50% of the cut-off yielded negative results, and controls with xylazine concentrations at 150% of the cut-off yielded positive results.

#### C. Specificity

The following tables list the concentrations of compounds (ng/mL) above which the Rapid Response™ Xylazine Test Strip Kit (Liquid / Powder) identified positive results at 5 minutes.

| Xylazine 1000 related compounds | Concentration (ng/ml) |
|---------------------------------|-----------------------|
| Xylazine                        | 1000                  |

The test device is designed to screen for the presence of Xylazine in suspicious solids or liquids. Other compounds found in illicit drugs may display cross reactivity with the test device. The following compounds were spiked into water, respectively, to examine possible cross-reactivity. No false positive was observed at the concentrations listed in the table. No significant cross-reactivities have been observed when following the testing and dilution procedure described in the IFU.

| Xylazine 1000 Interfering Substances |         |                 |         |
|--------------------------------------|---------|-----------------|---------|
| Acetaminophen                        | 5 mg/mL | Levamisole      | 5 mg/mL |
| Caffeine                             | 5 mg/mL | Lidocaine       | 5 mg/mL |
| Dimethylsulphone                     | 5 mg/mL | MDMA            | 5 mg/mL |
| Diphenhydramine                      | 5 mg/mL | Methamphetamine | 5 mg/mL |
| Disopyramide                         | 3 mg/mL | Phenacetin      | 5 mg/mL |
| Doxylamine                           | 3 mg/mL | Quinine         | 5 mg/mL |

### Glossary of Symbols

|  |                                     |  |              |  |              |
|--|-------------------------------------|--|--------------|--|--------------|
|  | Consult instructions for use        |  | Test per Kit |  | Do Not Reuse |
|  | Store between 36°F to 86°F (2-30°C) |  | Use by       |  | Catalogue #  |
|  | LOT                                 |  | Lot Number   |  |              |

**BTNX Inc.**  
722 Rosebank Road,  
Pickering, ON L1W 4B2  
Canada  
Technical support: 1-888-339-9964





# Rapid Response

## Kit de tiras reactivas para xilacina (Líquido/Polvo)

REF XYL-18S2-5K

Prospecto

### ADVERTENCIA: ESTA PRUEBA NO EVALÚA LA SEGURIDAD NI LA PUREZA DE LA DROGA

Un inmunoensayo visual rápido para la detección de xilacina en sustancias sospechosas sobre superficies y en líquidos en recipientes sospechosos.

Solo para uso forense.

No es un DIV.

## Uso previsto

El kit de tiras reactivas para xilacina Rapid Response™ (líquido/polvo) es un inmunoensayo visual rápido para la detección cualitativa y presuntiva de drogas en sustancias sospechosas de sólidos, líquidos y superficies. Al usar esta tira reactiva, puede determinar si su muestra contiene Xilacina. El límite de detección de esta prueba es de 1000 ng/ml.

| Parámetro      | Calibrador | Límite (ng/ml) |
|----------------|------------|----------------|
| XYL (Xilacina) | Xilacina   | 1000           |

## Materiales

### Materiales suministrados

- Tiras de prueba con microcucharas
- Tubos de muestras
- Soporte para tubos
- Hisopos
- Prospecto
- Tarjeta de interpretación de resultados

### Materiales necesarios pero no suministrados

- Temporizador

## Precauciones

- El dispositivo de ensayo NO está destinado a determinar la pureza, la composición o si la sustancia examinada es segura para su uso.**
- Un resultado positivo o negativo NO indica que la sustancia examinada sea segura.** Muchos factores pueden afectar el examen de muestras, incluyendo pero no limitado a la mezcla de múltiples sustancias, solubilidad y pH de la muestra.
- BTNX Inc. no fomenta en modo alguno el uso, suministro o producción de drogas ilegales o sustancias controladas. El dispositivo está destinado a la reducción de daños.** Siga los consejos de los organismos locales de reglamentación de drogas o de salud pública.
- No se hacen afirmaciones terapéuticas o diagnósticas directas sobre este producto. Estas pruebas no están implicadas en el diagnóstico, tratamiento, mitigación o prevención de una enfermedad, trastorno o síntoma en el ser humano, ni restauran, modifican o corrigen una estructura corporal, o función del cuerpo humano.
- El kit de tiras reactivas para xilacina Rapid Response™ solo brinda una indicación y debe utilizarse únicamente como una guía presuntiva para trabajar en conjunto con análisis adicionales como la cromatografía de gases-espectrometría de masas o la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Para un análisis completo, recomendamos que todas las muestras se envíen a un laboratorio certificado profesionalmente.
- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. No utilice

la prueba si su bolsa de aluminio está dañada. No reutilice las pruebas.


- Este kit contiene productos de origen animal. El conocimiento certificado del origen y/o estado sanitario de los animales no garantiza totalmente la ausencia de agentes patógenos transmisibles. Por lo tanto, se recomienda tratar estos productos como potencialmente infecciosos y manipularlos de acuerdo a las precauciones de seguridad habituales (no ingerir ni inhalar).
- Lea atentamente todo el procedimiento antes de realizar cualquier prueba.
- No coma, beba ni fume en la zona donde se manipulan las muestras y los kits. Se recomienda llevar ropa protectora, como guantes desechables y protección ocular, cuando se manipulen sustancias nocivas.
- La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente a los resultados.
- Los materiales de ensayo utilizados deben desecharse de acuerdo con la normativa local, estatal y/o federal.
- El kit de tiras reactivas Xylazine Rapid Response™ ha sido probado para condiciones de transporte extremas y su desempeño no se ha visto afectado.**
- Las tiras se pueden almacenar entre 36 y 86 °F (entre 2 y 30 °C).

## Protocolo de ensayo

Llevar las pruebas, muestras, solución y/o controles a temperatura ambiente 59-86 °F (15-30 °C) antes de su uso.



- Prepare la cantidad deseada de tubos de solución amortiguadora colocándolos en el soporte para tubos.
- Retire el sello del tubo de solución amortiguadora.
- Retire el hisopo de su envase.
- Recoja la muestra**
  - Para muestras líquidas:** Sumerja el hisopo en la muestra líquida, si es necesario gire y pase la muestra para absorber la mayor cantidad de líquido posible
  - Para muestras sólidas:** Sumerja el hisopo en el tubo de solución amortiguadora durante 3 segundos para humedecer el hisopo. Pase la punta del hisopo por la sustancia varias veces. Cuantas más veces pase el hisopo por la sustancia, más droga se podrá absorber.
  - Para muestras en polvo:** Usando la microcuchara, recoja una cucharada del fármaco (5-10 mg).

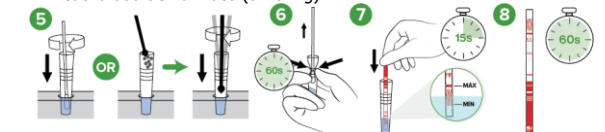

- Inserte el hisopo o la microcuchara en el tubo amortiguador, agite el hisopo suavemente durante 1 a 2 minutos y retírelo para extraer la muestra del hisopo.
- Cuando use el hisopo, retírelo del tubo amortiguador mientras presiona los lados del tubo para eliminar la mayor cantidad posible de líquido de la punta del hisopo.
- Retire la tira reactiva de su bolsa sellada y utilícela lo antes posible. Sostenga la tira por el extremo, donde está impreso el nombre del producto (XYL). No toque la membrana de la tira (la sección blanca de la tira). Sumerja la tira reactiva en el líquido durante al menos entre 10 y 15 segundos, sosteniéndola verticalmente. Sumerja la tira donde están las líneas onduladas, pero no por encima de la línea sólida (máxima) de la tira reactiva.
- Retire la tira de la muestra y colóquela sobre una superficie plana no absorbente. Inicie el temporizador y espere a que aparezcan la(s) banda(s) de colores.
- Un resultado negativo puede interpretarse tan pronto como aparezcan las líneas de test (T) y de control (C). Se puede interpretar un resultado positivo una vez que aparece la línea de control y el fondo se vuelve blanco, generalmente en 60 segundos. No lea los resultados después de 10

minutos.

## Interpretación de los resultados

### Positivo - Se detectó xilacina

Solo una banda de color en la región de control (C). Ninguna banda de color en la región de prueba (T).




### Negativo - No se detectó xilacina

Dos bandas de color en la membrana. Una banda en la región de control (C) y otra banda en la región de prueba (T).



### No válido

No aparece la banda de control. Los resultados de cualquier prueba que no produzca una banda de control en el tiempo de lectura especificado deben descartarse. Revise el procedimiento y repítalo con una nueva prueba. Si el problema persiste, deje de utilizar el kit inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor local.

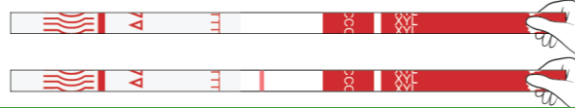

### AVISO:

- La intensidad del color en la región de prueba (T) puede variar dependiendo de la concentración de analitos presentes en la muestra. Por lo tanto, cualquier tono de color en la región de prueba debe considerarse negativo. Tenga en cuenta que esta es una prueba cualitativa solamente y no puede determinar la concentración de analitos en la muestra.
- Un volumen de muestra insuficiente, un procedimiento operativo incorrecto o pruebas caducadas son las razones más probables de la falla en la banda de control.

## Control de calidad

### Controles de procedimiento internos

Los controles de procedimiento internos se incluyen en la prueba. Una banda de color en la región de control (C) se considera un control de procedimiento interno positivo, que confirma un volumen de muestra suficiente y una técnica de procedimiento correcta.

## Limitaciones de la prueba

- Existe la posibilidad de que errores técnicos o de procedimiento, así como otras sustancias y factores, interfieran con el kit de tiras reactivas para xilacina Rapid Response™ (líquido/polvo) y generen resultados falsos. Un resultado positivo indica únicamente la presencia de xilacina y no indica la cantidad.**
- Un resultado negativo no descarta en ningún momento la presencia de xilacina, ya que pueden estar presentes por debajo del nivel mínimo de detección de la prueba.**
- El kit de tiras reactivas para xilacina Rapid Response™ (líquido/polvo) es de uso forense y solo debe utilizarse para la detección cualitativa de xilacina.
- Este ensayo proporciona únicamente un resultado analítico preliminar. Debe utilizarse un método químico alternativo más específico para obtener un resultado analítico confirmado. La cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) ha sido establecida como el método confirmatorio preferido por el Instituto Nacional sobre el Abuso

de Drogas (*National Institute on Drug Abuse*, NIDA). Deben aplicarse la consideración clínica y el juicio profesional a cualquier resultado de una prueba, especialmente cuando se indiquen resultados positivos preliminares.

- Un resultado negativo no necesariamente indica que la muestra esté libre de drogas. Se pueden obtener resultados negativos cuando hay droga presente pero se encuentra por debajo del nivel de corte del test.
- Es posible que este test no distinga entre la xilazina y otras sustancias ilícitas.

## Características de desempeño

### A. Reproducibilidad

La reproducibilidad del kit de tiras reactivas para xilacina Rapid Response™ (líquido/polvo) se verificó mediante pruebas ciegas realizadas en cuatro lugares diferentes. Se determinó que todas las muestras con concentraciones de xilacina al 50 % del punto de corte eran negativas, mientras que se determinó que todas las muestras con concentraciones de xilacina al 200 % del punto de corte eran positivas.

### B. Precisión

La precisión de la prueba se determinó mediante pruebas ciegas con soluciones de control. Los controles con concentraciones de xilacina al 50 % del punto de corte dieron resultados negativos, y los controles con concentraciones de xilacina al 150 % del punto de corte dieron resultados positivos.

### C. Especificidad

En las siguientes tablas se enumeran las concentraciones de compuestos (ng/ml) por encima de las cuales el kit de tiras reactivas para xilacina Rapid Response™ (líquido/polvo) identificó resultados positivos a los 5 minutos.

| Compuestos relacionados con la xilacina 1000 | Concentración (ng/ml) |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Xilacina                                     | 1000                  |

El dispositivo de prueba está diseñado para detectar la presencia de xilacina en sólidos o líquidos sospechosos. Otros compuestos que se encuentran en las drogas ilícitas pueden mostrar reactividad cruzada con el dispositivo de prueba. Los siguientes compuestos se introdujeron en agua, respectivamente, para examinar una posible reactividad cruzada. No se observó ningún falso positivo en las concentraciones indicadas en la tabla. No se han observado reactividades cruzadas significativas al seguir el procedimiento de prueba y la dilución que se describe en las instrucciones de uso

| Sustancias interferentes Xilacina 1000 |         |               |         |
|----------------------------------------|---------|---------------|---------|
| Acetaminofén                           | 5 mg/mL | Levamisol     | 5 mg/mL |
| Cafeína                                | 5 mg/mL | Lidocaína     | 5 mg/mL |
| Dimetilsulfona                         | 5 mg/mL | MDMA          | 5 mg/mL |
| Difenhidramina                         | 5 mg/mL | Metanfetamina | 5 mg/mL |
| Disopiramida                           | 3 mg/mL | Fenacetina    | 5 mg/mL |
| Doxilamina                             | 3 mg/mL | Quinidina     | 5 mg/mL |

## Glosario de símbolos

|                                                                                       |                                         |                                                                                       |                |                                                                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Consulte las instrucciones de uso       |  | Pruebe por kit |  | No reutilizar  |
|  | Almacenar entre 36°F y 86°F (2 a 30 °C) |  | Usar antes de  |  | N° de catálogo |

|                                                                                       |                                                                           |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | N° de lote                                                                |  |
|  | <b>BTNX Inc.</b><br>722 Rosebank Road,<br>Pickering, ON L1W 4B2<br>Canadá |                                                                                       |
|                                                                                       | <b>Technical Support : 1-888-339-9964</b>                                 |                                                                                       |



# Rapid Response

## Trousse de bandelettes de d  t  ction de la xylazine (liquide/poudre)

REF XYL-18S2-5K

Notice du produit

**AVERTISSEMENT : CE TEST NE PERMET PAS D'EVALUER LA SECURITE OU LA PURETE DE LA DROGUE.**

**Test immunologique visuel rapide pour la d  t  ction de la xylazine dans les substances suspectes pr  sentes sur des surfaces et dans les liquides provenant de r  cipients suspects.**

Pour usage m  dico-l  gal et IDIV

## Utilisation pr  vue

La Rapid Response™ trousse de bandelettes de d  t  ction de la xylazine (liquide/poudre) est un test immunologique visuel rapide pour la d  t  ction qualitative et pr  sumptive de drogues dans des substances provenant de solides, de liquides et de surfaces. En utilisant cette bandelette de test, vous pouvez d  terminer si votre   chantillon contient de la xylazine. La limite de d  t  ction de ce test est de 1000 ng/mL.

| Param  tre     |   talon  | Seuil (ng/mL) |
|----------------|----------|---------------|
| XYL (xylazine) | Xylazine | 1 000         |

## Mat  riel

### Mat  riel fourni

- Bandes de test avec micro-cuill  res
-   couillons
- Notice du produit
- Tubes de tampon
- Carte d'interpr  tation des r  sultats
- Support de tubes

### Mat  riel requis mais non fourni

- Chronom  tre

## Pr  cautions

- Le dispositif de test n'est PAS destin      d  terminer la puret  , la composition ou l'innocuit   de la substance examin  e.**
- Un r  sultat positif ou n  gatif n'est PAS une indication que la substance examin  e est sans danger.** De nombreux facteurs entrent en jeu lors de l'analyse des   chantillons, notamment le m  lange de plusieurs substances, la solubilit   et le pH de l'  chantillon.
- BTNX Inc. n'encourage aucunement l'utilisation, la fourniture ou la production de drogues illicites ou de substances contr  l  es. Le dispositif est con  u pour r  duire les m  faits.** Suivez les conseils de votre organisme local de r  duction des m  faits ou de sant   publique.
- Aucune all  gation th  rapeutique ou diagnostique directe n'est faite pour ce produit. Ces tests ne servent pas    diagnostiquer, traiter, att  nuer ou pr  venir une maladie, un trouble ou un sympt  me chez l'Homme, ni    restaurer, modifier ou corriger une structure corporelle ou une fonction du corps humain.
- La trousse de bandelettes Rapid Response™ pour la d  t  ction de la xylazine ne donne qu'une indication et ne doit   tre utilis  e que comme un guide de pr  sumption    utiliser en conjonction avec des analyses compl  mentaires telles que la chromatographie en phase gazeuse associ  e    la spectrom  trie de masse ou la chromatographie liquide    haute performance (HPLC). Pour une analyse compl  te, nous recommandons d'envoyer tous les   chantillons    un laboratoire professionnel certifi  .
- Ne pas utiliser apr  s la date de p  remption indiqu  e sur l'emballage. Ne pas

utiliser le test si sa pochette en aluminium est endommag  e. Ne pas r  utiliser les tests.

- Cette trousse contient des produits d'origine animale. Une connaissance certifi  e de l'origine et/ou de l'  tat sanitaire des animaux ne garantit pas totalement l'absence d'agents pathog  nes transmissibles. Il est donc recommand   de traiter ces produits comme potentiellement infectieux et de les manipuler en respectant les mesures de s  curit   habituelles (ne pas ing  rer ni inhaler).
- Lire attentivement l'int  gralit   de la proc  dure avant d'effectuer des tests.
- Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone o   les   chantillons et les trousses sont manipul  s. Il est recommand   de porter des v  tements de protection comme des gants jetables et une protection oculaire lors de la manipulation de substances nocives.
- L'humidit   et la temp  rature peuvent nuire aux r  sultats.
- Le mat  riel de test utilis   doit   tre   limin   conform  ment aux r  glementations locales, provinciales et/ou f  d  rales.
- Rapid Response™ trousse de bandelettes de d  t  ction de la xylazine a   t   test   dans des conditions de transport extr  mes et sa performance n'a pas   t   affect  e.**
- Le test peut   tre conserv   entre 36 et 86   F (2 et 30   C).

## Proc  dure de test

**Porter les tests, les   chantillons, le tampon et/ou les contr  les    temp  rature ambiante, soit entre 59 et 86   F (entre 15 et 30   C) avant utilisation.**



- Pr  parez le nombre souhait   de tubes de tampon en les pla  ant dans le support de tubes.
- Retirez le joint du tube      chantillon
- Retirez l'  couvillon de son emballage.
- Pr  levez l'  chantillon**
  - Pour les   chantillons liquides :** Trempez l'  couvillon dans l'  chantillon liquide, tournez-le et glissez-le au besoin afin d'absorber le plus de liquide possible.
  - Pour les   chantillons solides:** Trempez l'  couvillon dans le tube      chantillon pendant 3 secondes afin d'humidifier l'  couvillon. Passez plusieurs fois la pointe de l'  couvillon dans la substance. Plus l'  couvillon est ins  r   dans la substance, plus le m  dicament peut   tre absorb  e.
  - Pour les   chantillons de poudre :**    l'aide de la microcuill  re, pr  levez une mesure de m  dicament (5    10 mg).



- Ins  rez l'  couvillon ou la microcuill  re dans le tube de solution tampon, agitez doucement l'  couvillon pendant 1    2 minutes et retirez-le pour extraire l'  chantillon de l'  couvillon.
- Lorsque vous utilisez l'  couvillon, retirez-le du tube de solution tampon tout en pressant les c  t  s du tube pour enlever le plus de liquide possible de la pointe de l'  couvillon.
- Retirez la bandelette de test de son sachet scell   et utilisez-la d  s que possible. Tenez la bandelette par l'extr  mit  , o   le nom du produit (XYL) est imprim  . Ne touchez pas la membrane de la bandelette (la partie blanche de la bandelette). En tenant la bandelette verticalement, plongez-la dans le liquide pendant au moins 10    15 secondes. Immergez la bandelette    l'endroit o   se trouvent les lignes ondul  es, mais pas au-dessus de la ligne pleine (maximum) de la bandelette.
- Retirez la bandelette de l'  chantillon et placez-la sur une surface plane non absorbante. Lancez le minuteur et attendez l'apparition de la (des) bande(s) color  e(s).

- Un r  sultat n  gatif peut   tre interpr  t   d  s que deux lignes, celle du test (T) et celle de contr  le (C), apparaissent. Un r  sultat positif peut   tre interpr  t   une fois que la ligne de contr  le est apparue et que le fond est pass   au blanc, ce qui prend g  n  ralement 60 secondes. Ne pas interpr  ter le r  sultat apr  s plus de 10 minutes.

## Interpr  tation des r  sultats

### Positif : xylazine d  tect  e

Une seule bande color  e appara  t dans la zone de contr  le (C). Aucune bande color  e visible n'appara  t dans la zone de test (T).




### N  gatif : la xylazine n'a pas pu   tre d  tect  e

Deux bandes color  es apparaissent sur la membrane. Une bande appara  t dans la zone de contr  le (C) et une autre dans la zone de test (T).



### Invalide

La bande de contr  le n'appara  t pas. Les r  sultats de tout test qui n'a pas produit de bande de contr  le au moment sp  cifi   de la lecture doivent   tre   limin  s. Veuillez revoir la proc  dure et recommencer avec un nouveau test. Si le probl  me persiste, arr  tez imm  diatement l'utilisation de la trousse et contactez votre distributeur local.

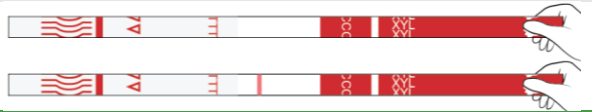

### REMARQUE :

- La couleur de la zone de test (T) peut varier en fonction de la concentration des analytes pr  sents dans l'  chantillon. Par cons  quent, toute nuance de couleur dans la zone de test doit   tre consid  r  e comme un r  sultat n  gatif. Notez qu'il s'agit uniquement d'un test qualitatif et qu'il ne permet pas de d  terminer la concentration d'analytes dans l'  chantillon.
- Un volume d'  chantillons insuffisant, une proc  dure de fonctionnement incorrecte ou des tests p  rim  s sont les raisons les plus probables de l'  ch  c de la bande de contr  le.

## Contr  le qualit  

### Contr  les internes de la proc  dure

Les contr  les internes de la proc  dure sont inclus dans le test. La pr  sence d'une bande color  e dans la zone de contr  le (C) est consid  r  e comme un contr  le interne positif de la proc  dure, confirmant que le volume de l'  chantillon est suffisant et que la technique de proc  dure est correcte.

## Limites du test

- Il se peut que des erreurs techniques ou de proc  dure, ainsi que d'autres substances et facteurs, interf  rent avec la trousse de la bandelette de test Rapid Response™ pour la d  t  ction de la xylazine (liquide/poudre) et provoquent de faux r  sultats.**
- Un r  sultat positif indique uniquement la pr  sence de xylazine et n'indique pas sa quantit  .**
- Un r  sultat n  gatif n'exclut    aucun moment la pr  sence de xylazine, car elle peut   tre pr  sente au-dessous du niveau de d  t  ction minimum du test.**
- La trousse de bandelettes Rapid Response™ pour la d  t  ction de la xylazine (liquide/poudre) est destin  e    un usage m  dico-l  gal et au IDIV et ne doit   tre utilis  e que pour la d  t  ction qualitative de la xylazine.

- Ce test fournit uniquement un r  sultat analytique pr  liminaire. Une m  thode chimique alternative plus sp  cifique doit   tre utilis  e pour obtenir un r  sultat analytique confirm  . La chromatographie en phase gazeuse associ  e    la spectrom  trie de masse (GC/MS) a   t     tablie comme la m  thode de confirmation pr  f  r  e par le l'Institut national sur l'abus des drogues (NIDA). Tout r  sultat de test doit faire l'objet d'un examen clinique et d'un jugement professionnel, en particulier lorsque des r  sultats positifs pr  liminaires sont indiqu  s.
- Un r  sultat n  gatif n'indique pas n  cessairement qu'il n'y a pas de trace du m  dicament dans l'  chantillon. Des r  sultats n  gatifs peuvent   tre obtenus lorsque le m  dicament est pr  sent, mais que sa concentration est en dessous du seuil de d  t  ction minimal.
- Ce test peut ne pas permettre de distinguer la xylazine de certaines autres substances illicites.

## Caract  ristiques de performance

### A. Reproductibilit  

La reproductibilit   de la trousse de bandelettes Rapid Response™ pour la d  t  ction de la xylazine (liquide/poudre) a   t   v  rifi  e par des tests    l'aveugle r  alis  s dans quatre endroits diff  rents. Les   chantillons dont la concentration en xylazine se situait    50 % du seuil ont tous   t   consid  r  s comme n  gatifs, tandis que les   chantillons dont la concentration en xylazine se situait    200 % du seuil ont tous   t   consid  r  s comme positifs.

### B. Pr  cision

La pr  cision du test a   t   d  termin  e par des tests    l'aveugle avec des solutions de contr  le. Les contr  les avec des concentrations de xylazine    50 % du seuil ont donn   des r  sultats n  gatifs, et les contr  les avec des concentrations de xylazine    150 % du seuil ont donn   des r  sultats positifs.

### C. Sp  cificit  

Les tableaux suivants pr  sentent les concentrations de compos  s (ng/mL) au-dessus desquelles la trousse de bandelettes Rapid Response™ pour la d  t  ction de la xylazine (liquide/poudre) a permis d'identifier des r  sultats positifs    5 minutes.

| Compos  s apparent  s    la xylazine 1 000 | Concentration (ng/mL) |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Xylazine                                   | 1000                  |

Le dispositif est con  u pour d  t  cter la pr  sence de la xylazine dans des solides ou des liquides suspects. D'autres compos  s chimiques pr  sents dans les drogues illicites peuvent pr  senter une r  activit   crois  e avec le dispositif. Les compos  s chimiques suivants ont   t   introduits dans l'eau, de mani  re successive, pour examiner la possibilit   d'une r  activit   crois  e. Aucun faux positif n'a   t   observ   aux concentrations indiqu  es dans le tableau. Aucune r  activit   crois  e significative n'a   t   observ  e lorsque les proc  dures pour effectuer le test et la dilution d  crites dans le mode d'emploi ont   t   suivies.

| Substances interf  rent avec la Xylazine 1000 |         |                   |         |
|-----------------------------------------------|---------|-------------------|---------|
| Ac  taminoph  ne                              | 5 mg/mL | L  vamisole       | 5 mg/mL |
| Caf  ine                                      | 5 mg/mL | Lidoca  ne        | 5 mg/mL |
| Dim  thylsulfone                              | 5 mg/mL | MDMA              | 5 mg/mL |
| Diph  nhydramine                              | 5 mg/mL | M  thamph  tamine | 5 mg/mL |
| Disopyramide                                  | 3 mg/mL | Ph  nac  tine     | 5 mg/mL |
| Doxylamine                                    | 3 mg/mL | Quinidine         | 5 mg/mL |

## Glossaire des symboles

|                                                                                       |                                                         |                                                                                       |                      |                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Consultez le mode d'emploi                              |  | Test par trousse     |  | Ne Pas R  utiliser |
|  |    conserver entre 2 et 30   C (entre 36   F et 86   F) |  |    utiliser avant le |  | N   de catalogue   |
|  | Num  ro de lot                                          |                                                                                       |                      |                                                                                       |                    |

**BTNX, Inc**  
722 Rosebank Road,  
Pickering, ON L1W 4B2  
Canada

**Support Technique : 1-888-339-9964**

